


Release informasjon Senior Living-app

Versjon 1.18.0

11.05.2022





Phoniro Senior Living – 1.18.0
Lanseres i Google Play uke 20



tel:



Phoniro Senior Living – UX-endringer (Android)

Phoniro Senior Living – UX-endringer (Android)


Ny undermeny i Senior Living

Senior Living har nå en lignende undermeny som ble lansert i Home Care-appen i release 21.2. Menyen kan åpnes hvor som helst i appen (unntatt for popup-vinduer) ved enten å:

- Sveip innover fra venstre kant av appen, eller
- Trykk på hamburger-ikonet (tre horisontale linjer) øverst til venstre.

Undermenyen samler informasjon og funksjonalitet som tidligere ble vist på startskjermen og i fanene nederst i appen.

Dette betyr at oversiktsskjermbildet i Senior Living (der alle alarmer vises) ikke lenger har noen faner. Dette skaper mer plass til å vise flere alarmer og tilstedeværelsesmarke- ringer.

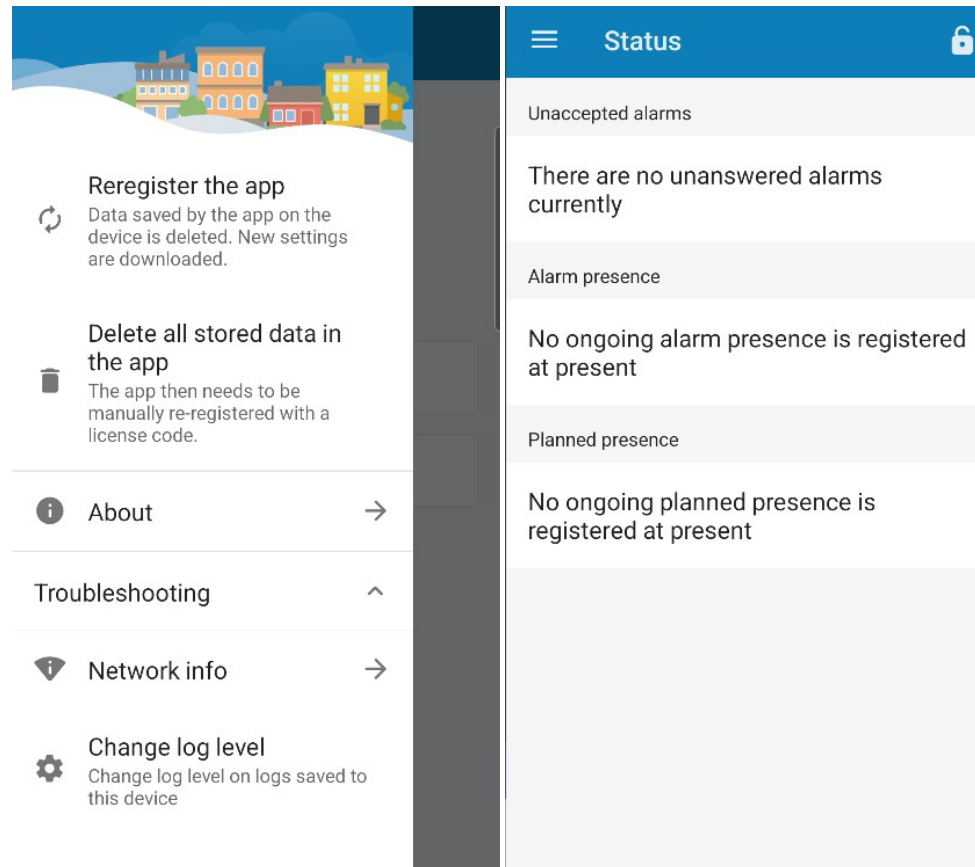

Phoniro Senior Living – UX-endringer (Android)

Virkning på alarmknappene


Alarmknappene for å starte en assistanse- og nødalarm, har blitt flyttet til undermenyen som du kan få tilgang til fra hvor som helst i appen (unntatt popup-vinduer).

Alarmknappene er fjernet fra:

- Oversiktsskjermbildet (der alle alarmer vises)
- Siden der du foretar alarmvurdering via kamera

Alarmknappene forblir i alle detaljerte visninger

Avgjørelsen om å flytte alarmknappene fra de forskjellige sidene til undermenyen var basert på bruker tilbakemeldinger. En ganske vanlig feil var at brukere sendte falske alarmer siden den var så fremtredende plassert nederst på skjermbildet. Vi er sikre på at å flytte knappene til undermenyen vil redusere slike falske alarmer.

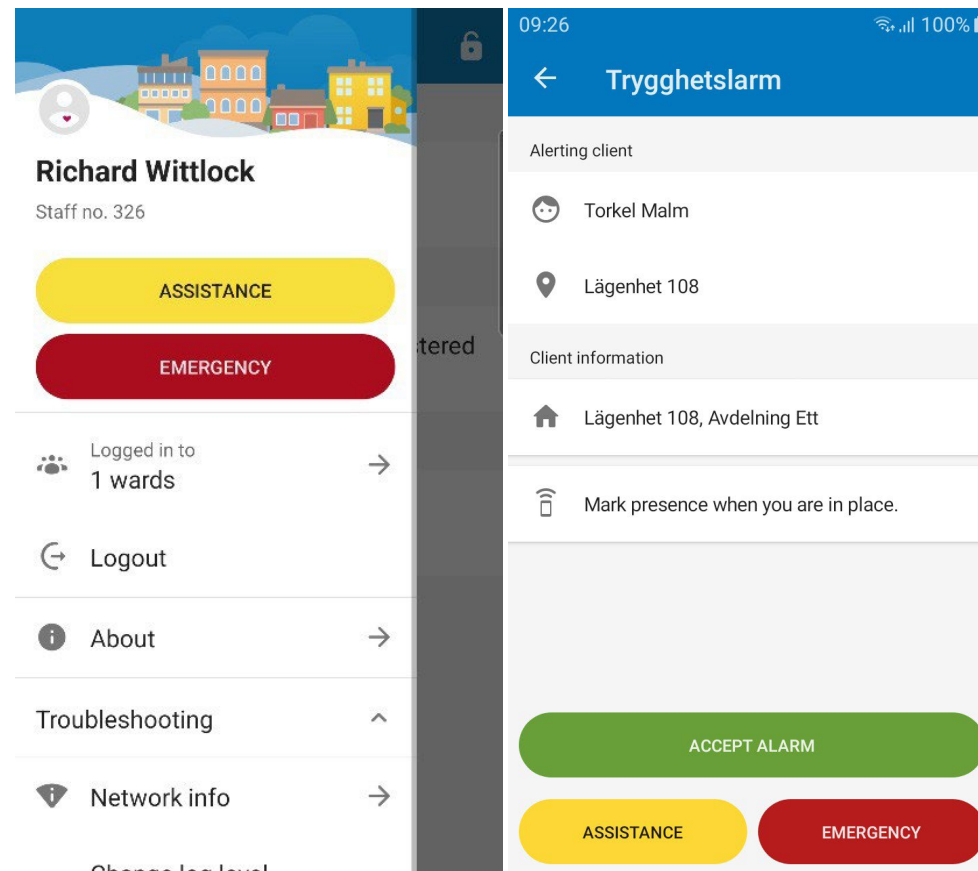


Phoniro Senior Living – UX-endringer (Android)

i Når du endrer innstillingen for mørk eller lys modus på telefonen, må appen startes på nytt for at innstillingen skal aktiveres.

Mørk modus

Funksjonen for mørk modus som vi lanserte for vår Home Care-app som ble lansert i release 21.3, er nå også lansert for vår Phoniro Senior Living-app. Mørk modus aktiveres automatisk når telefonen eller nettbrettet er i mørk modus. Med dette har også startsidene fått et nytt design

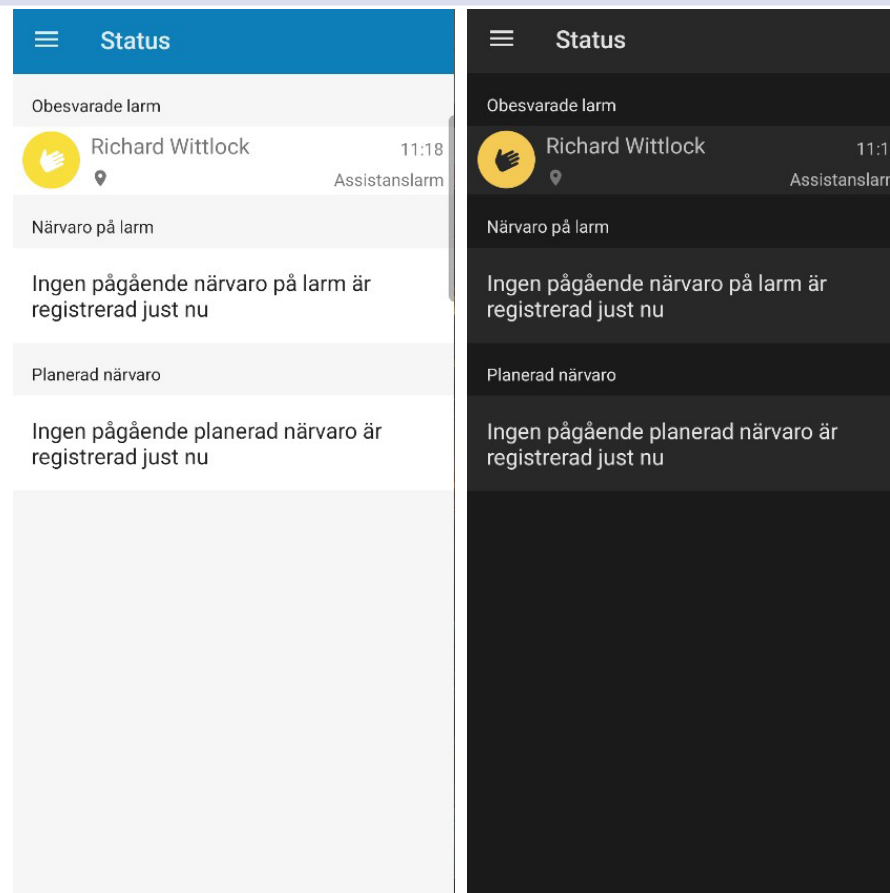

Phoniro Senior Living – SAML

SAML-pålogging i Senior Living

Popup-vinduet som vises når du logger på med SAML, dekker nå hele skjermen.

11:02

saml
TEST.ID

SAMLTEST.ID

Username

Password

Don't Remember Login

Clear prior granting of permission for release of your information to this service.

LOGIN

If your service had a logo and description in its metadata, they would be displayed here for the user.

You can use the following test accounts. [Signet](#) does not advise putting passwords on login pages.

USERNAME: PASSWORD:

Endring hvilke versjoner av Android & iOS som Phoniro-apper støtter

Fra **31. desember 2022**, øker vi kravet for hvilken minimumsversjon av iOS og Android som kreves for å bruke appene våre.

Ved å øke behovet for hvilke versjoner av Android og iOS appene kan brukes med, kan vi øke kvaliteten på systemet vårt. Fordi appene ikke lenger trenger å støtte disse versjonene, er resultatet bedre apper. Dessuten har vi sett at telefoner med eldre operativsystemer ikke fungerer så bra sammenlignet med nyere. Ved å øke kravene sikrer vi en samlet høyere kvalitet for brukerne våre.

Etter 31. desember 2022, vil telefoner med lavere versjon av Android eller iOS ikke kunne oppdatere appene våre til en versjon som er lansert etter denne datoen. Du vil heller ikke kunne installere noen av appene våre etter denne datoen på en telefon med et operativsystem som er lavere enn det nye kravet. Eksisterende apper som installeres før 31. desember 2022 vil ikke påvirkes selv om de kjører på en versjon av Android eller iOS som er lavere enn det nye kravet.

Kompatibilitetstabell	Android	iOS
Gjeldende krav (lavest)	5.0	9.0
Fremtidige krav, etter 31. desember 2022 (laveste)	9.0	14.0



Hvis du bruker telefoner som har Android 5-8 eller iOS 9-13, bør du passe på å oppgradere OS-versjonen eller anskaffe nye telefoner så snart som mulig.

Påminnelse til dem av dere som fremdeles ikke bruker app-butikker til å laste ned og oppdatere Phoniro-apper.

I forbindelse med [release 20.4](#) kunngjorde vi at det fra **31.12.2021** ikke vil være mulig å laste ned og oppdatere appene våre fra noen annen kilde enn Google Play eller App Store. Dette er uavhengig av om man bruker MDM-verktøy eller ikke. (MDM-verktøy som allerede er konfigurert til å bruke Google Play og/eller [AppStore](#), vil fungere som før.